

## Flushing Medium

### Ingredientia

#### 1084 Flushing Medium

Albumini humani solutio; Aqua; CaCl<sub>2</sub>; Gentamicinum;  
Glucosum; HEPES; KCl; MgSO<sub>4</sub>; NaHCO<sub>3</sub>; NaCl;  
NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>; Phenolsulfonphthaleinum; Pyruvas; SSR

#### 1076 Flushing Medium with Heparin

Albumini humani solutio; Aqua; CaCl<sub>2</sub>; Gentamicinum;  
Glucosum; Heparinum; HEPES; KCl; MgSO<sub>4</sub>; NaCl;  
NaHCO<sub>3</sub>; NaH<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>; Phenolsulfonphthaleinum; Pyruvas;  
SSR;

#### Product No.

1084  
1076



#### Customer Service:

E-mail: [customerservice.medicult@origio.com](mailto:customerservice.medicult@origio.com)

Tel: +45 46 79 02 02 Fax: +45 46 79 03 02



ORIGIO a/s

Knardrupvej 2, DK-2760 Måløv, Denmark

[www.origio.com](http://www.origio.com)

Tel: +45 46790200 Fax: +45 46790300

**origio** MEDICULT  
'S MEDIA

en

## Flushing Medium

---

For retrieval, holding and washing of oocytes.

This product is for IVF treatment of women, whether the cause of infertility is male or female. The product should only be used by professionals trained in IVF treatment.

### Products

1084 Flushing Medium

1076 Flushing Medium with 10 IU/ml Heparin

### Contains

Heparin 10 IU/ml (not Product No. 1084)

Human albumin solution (HAS)

Recombinant human insulin

Gentamicin sulphate 10 µg/ml

### Quality control testing

Sterility tested (Ph.Eur., USP)

Osmolality tested (Ph.Eur., USP)

pH tested (Ph.Eur., USP)

Endotoxin tested  $\leq 0.1$  EU/ml (Ph.Eur., USP)

HSA analysis (Ph.Eur, USP)

Mouse Embryo Assay (MEA) tested

**Note:** The results of each batch are stated on a Certificate of Analysis, which is available on [www.origio.com](http://www.origio.com).

### Storage instructions and stability

The products are aseptically processed and supplied sterile.

Store in original container at 2-8°C, protected from light.

Do not freeze.

Discard excess (unused) media following warming.

The product is to be used within 7 days after opening.

When stored as directed by the manufacturer the product is stable until the expiry date shown on the vial label.

### Precautions and warnings

Do not use the product if:

1. Product packaging appears damaged or if the seal is broken.
2. Expiry date has been exceeded.
3. The product becomes discoloured, cloudy, turbid, or shows any evidence of microbial contamination.

**Caution:** All blood products should be treated as potentially infectious. Source material used to manufacture this product were tested and found non-reactive for HbsAg and negative for Anti-HIV-1/-2, HIV-1, HBV, and HCV. Furthermore source material have been tested for parvovirus B19 and found to be non-elevated. No known test methods can offer assurances that products derived from human blood will not transmit infectious agents.

**Caution:** Oocytes are extremely sensitive to pH changes and transient cooling in vitro. Modest fluctuations in temperature can cause disruption of the meiotic spindle with possible chromosome dispersal.

**Caution:** This product contains Gentamicin and should not be used on patients that have known allergy to Gentamicin or similar antibiotics.

**Note:** The cap of the bottle should be kept tightly closed during the pre-warming.




**Note:** Please note the need for traceability of this product. In addition national legal requirements in your country may exist in this field.

**Note:** Devices used in combination with this device should be intended for the particular purpose.

**Note:** Dispose of the device in accordance with local regulations for disposal of medical devices.

### Instructions for use

1. Pre-warm Flushing Medium to 37°C.
2. Keep Flushing Medium at 37°C in a heating block throughout the entire process of oocyte recovery and transport to the embryology laboratory.
3. Syringes used for flushing the follicle are filled with the Flushing Medium. Aspirate the follicular fluid and flush the follicle with a volume of medium equivalent to the amount of follicular fluid collected. Take care not to expand the follicle beyond its original size.
4. Wash oocytes with Flushing Medium or pre-equilibrated culture medium, taking care to remove any blood clots and granulosa cells.
5. Transfer oocytes to pre-equilibrated culture medium and store at 37°C in a 5-6% CO<sub>2</sub> environment.

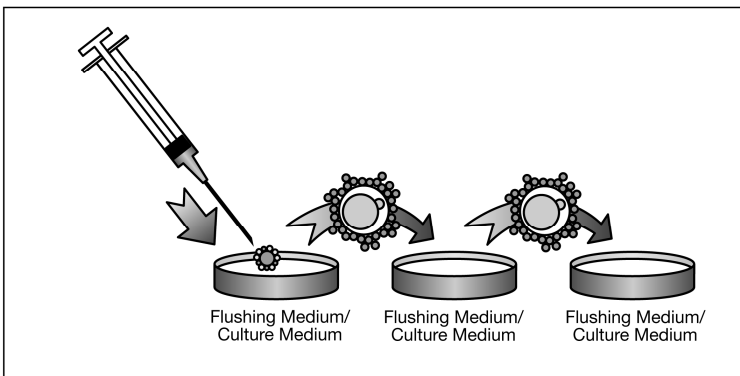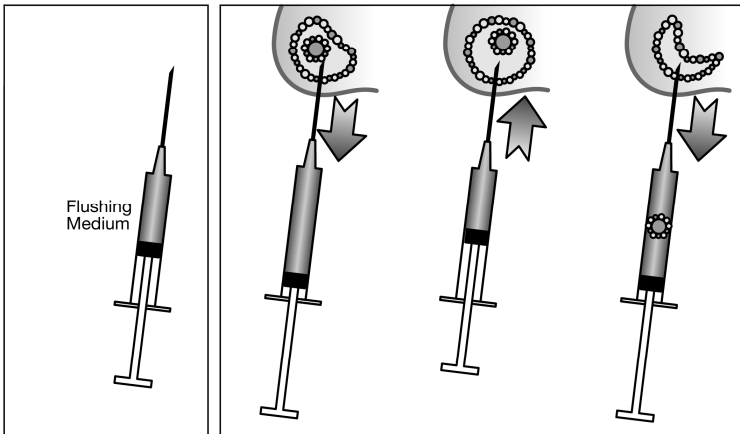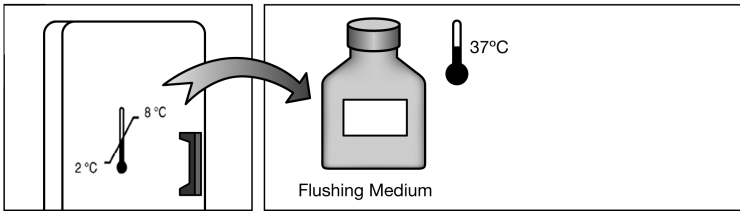



cs	Symbol	Po zahřátí zlikvidujte přebytečný (nepoužitý) materiál.	Použijte do 7 dnů po otevření	Nepoužívejte, je-li obal poškozený	Obsahuje roztok lidského albuminu
da	Symboler	Kassér (ubrugt) overskudsmedie efter opvarmning.	Anvendes inden for 7 dage fra åbningen.	Må ikke anvendes, hvis pakningen er beskadiget.	Indeholder: Human albumin opløsning.
de	Symbole	Überschüssige (unbenutzte) Medien nach Erwärmung entsorgen.	Innerhalb von 7 Tagen nach der Öffnung verwenden.	Bei beschädigter Verpackung nicht benutzen.	Enthält: Humanalbuminlösung.
el	Σύμβολα	Οι (μη χρησιμοποιηθείσες) ποσότητες που περισσεύουν και έχουν θερμανθεί θα πρέπει να απορρίπτονται.	Το υλικό να χρησιμοποιείται μέσα σε 7 ημέρες από το άνοιγμα.	Μην χρησιμοποιείτε το υλικό αν το πακέτο έχει υποστεί ζημιά.	Περιέχει διάλυμα ανθρώπινης αλβουμίνης.
en	Symbols	Discard excess (unused) media following warming.	Use within 7 days of opening	Do not use if package is damaged.	Contains: Human albumin solution.
es	Símbolos	Eliminar el exceso de medio (no utilizado) después de haberlo calentado.	Utilizar antes de 7 días después de abierto.	No utilizar si el paquete está dañado.	Contiene: Solución de Albúmina humana.
fr	Symboles	Retirer le milieu excédentaire (non utilisé) après réchauffage.	A utiliser dans un délai de 7 jours après ouverture.	Ne pas utiliser le produit si l'emballage est endommagé.	Contiennent: Solution d'albumine humaine.
it	Simboli	Smaltire i terreni di coltura eccedenti (non utilizzati) dopo incubazione.	Utilizzare entro 7 giorni dall'apertura.	Non utilizzare se la confezione è danneggiata.	Contiene: Soluzione di Albumina umana.
kk	Таңбалар	Артық (қолданылмаған) заттарды келесі ескертуді пайдаланып тастаңыз.	Ашудан кейін 7 күннің ішінде қолданыңыз	Орамы зақымдалған болса, пайдалануға болмайды	Құрамында адам альбумин сұйықтығы бар
pt	Símbolos	Eliminar o meio excedentário (não utilizado) após aquecimento.	Use no prazo de 7 dias após aberto.	Não use se a embalagem estiver danificada.	Contém: Solução de Albumina humana.
ro	Simboluri	După încălzire aruncați excesul de mediu (nefolosit).	Utilizați în decurs de 7 zile de la desigilare.	Nu utilizați dacă ambalajul este deteriorat.	Conține soluție de albumină umană.
ru	Символы	После нагревания неиспользованную среду необходимо слить	Использовать в течение 7 дней после вскрытия	Не использовать, если упаковка повреждена	Содержит раствор альбумина человека
tr	Semboller	Fazla (kullanılmamış) vasatı ısıtma sonrasında atın	Açtıktan sonra 7 gün içinde kullanın	Ambalaj hasarlıysa kullanmayın	İnsan albümin çözümü içerir