

20 maja 2021 r.

PILNE: KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA STOSOWANIA PRODUKTU — PI-21-4000

System stentu żylnego Venovo™

Numery katalogowe (REF): patrz Załącznik 1
Numery partii (Lot): wszystkie nieprzeterminowane produkty

Typ działania: wycofanie produktu

Do wiadomości: angiologów i chirurgów naczyniowych, personelu klinicznego, menedżerów ds. ryzyka, personelu biomedycznego


Niniejsze pismo zawiera istotne informacje wymagające Państwa uwagi.

Szanowni Państwo!

Firma BD wydaje niniejszy komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania produktu w celu wycofania wszystkich nieprzeterminowanych partii **systemu stentu żylnego Venovo™**. Numery katalogowe (REF) i numery partii (Lot) wyrobów dostarczonych przez firmę BD na rynek EMEA zawiera Załącznik 1. Zgodnie z naszą dokumentacją dystrybucyjną Państwa placówka mogła otrzymać wyroby, których dotyczy problem.

Opis problemu

Firma BD ustaliła na podstawie opinii klientów, że mogą występować problemy z implantacją **systemu stentu żylnego Venovo™**, ponieważ proksymalny koniec stentu może nie rozszerzać się natychmiast po założeniu. Zamiast tego proksymalny koniec stentu nadal przylega do podkładu stentu na systemie wprowadzania, jak pokazano na rysunku 1 poniżej. Dodatkowe badania próbek wykazały ślady materiału podkładu (biokompatybilnego silikonu medycznego), który mocno przylega do powierzchni rozpórki stentu tylko wtedy, gdy podkład styka się ze stentem.

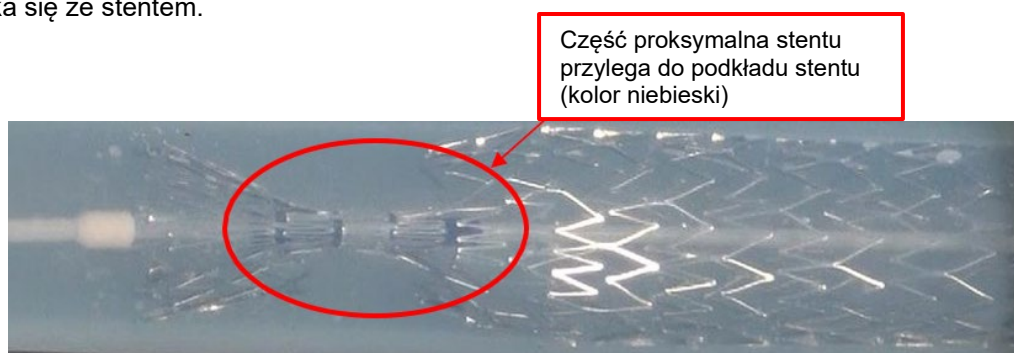

Rysunek 1: Proksymalny koniec stentu przylega do materiału podkładu stentu.

Konsekwencje kliniczne

W przypadkach, gdy stent rozszerza się samoczynnie, nie ma dodatkowego ryzyka powstania szkód. Natomiast nadmierne manipulowanie lub stosowanie siły względem systemu wprowadzania z użyciem cewnika podczas prób wspomaganego rozszerzania się stentu mogą powodować szkody różnego stopnia. Do potencjalnych szkód należą: wydłużenie czasu zabiegu, uszkodzenie lub zniekształcenie stentu, potencjalne uszkodzenie naczyń i/lub zaburzenia hemodynamiczne wpływające na przepływ krwi i/lub zdarzenie zakrzepowe.

Skargi, które dotychczas zgłoszono firmie BD, dotyczyły różnych rozmiarów oferowanych produktów. Niebezpieczna sytuacja polega na tym, że stent w kluczowym obszarze, w pobliżu końca proksymalnego, nie

rozszerza się natychmiast w momencie założenia. W takiej sytuacji lekarz może nie odczekać, aż nastąpi normalne rozszerzenie, lecz próbuje manipulować stentem lub używać innych wyrobów wewnątrznacyniowych albo technik w celu ułatwienia rozszerzania stentu. Może to prowadzić do niewłaściwego umieszczenia lub uszkodzenia stentu i urazu naczyń krwionośnych. Przyłgnięcie biokompatybilnego silikonu medycznego do wewnętrznej powierzchni stentu, jeśli jego ilość jest znaczna i materiał ten się oderwie, może prowadzić do reakcji zapalnych lub zablokowania/niedrożności naczyń krwionośnych.

Jeśli produkt został już bezpiecznie zaimplantowany, nie są wymagane żadne szczególne działania następcze wobec pacjenta. Prosimy o zgłaszanie firmie BD wszelkich niepożądanych skutków zdrowotnych w związku z użytkowaniem tego produktu, jeśli jeszcze tego nie zrobiono.

Działania naprawcze podjęte przez firmę BD

Firma BD zaprzestała wytwarzania produktu objętego niniejszym komunikatem dotyczącym bezpieczeństwa i prowadzi szczegółowe dochodzenie w celu ustalenia pierwotnej przyczyny problemu.

Porada dotycząca działań, jakie ma podjąć użytkownik:

1. Należy zaprzestać używania **systemu stentu żylnego Venovo™**.
2. Należy zidentyfikować, poddać kwarantannie i zniszczyć wszystkie partie **systemu stentu żylnego Venovo™**. Numery katalogowe (REF) i numery partii (Lot) zawiera Załącznik 1.
 - a. Wszystkie partie z datą ważności przypadającą po kwietniu 2021 r. są objęte tym wycofaniem produktu. Aby określić datę ważności na etykiecie produktu, patrz Załącznik 2.
3. Niniejszy komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania produktu należy rozesłać do wszystkich osób w Państwa placówce, które mogą używać **systemu stentu żylnego Venovo™**.
4. W przypadku przekazania dalej opisywanych produktów prosimy o ustalenie ich użytkowników i niezwłoczne powiadomienie ich o niniejszym komunikacie dotyczącym bezpieczeństwa.
5. Prosimy odesłać wypełniony formularz odpowiedzi klienta zamieszczony na stronie **3** na adres **bok@bd.com / fax 22 321 09 38 jak najszybciej, ale nie później niż w dniu 30 czerwca 2021 roku.**
 - a. UWAGA: Jeśli nie używają już Państwo produktu, nadal ważne jest, aby Państwo odesłali formularz odpowiedzi klienta na potrzeby naszych procedur uzgadniających.
 - b. UWAGA: Firma BD zwróci należności wszystkim klientom, których dotyczy wycofanie produktu, po otrzymaniu wypełnionego Formularza odpowiedzi klienta.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub napotkania jakichkolwiek problemów związanych z produktem lub kwestią opisaną w niniejszym komunikacie dotyczącym bezpieczeństwa stosowania produktu prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem firmy BD.

Potwierdzamy zawiadomienie o niniejszych działaniach odpowiednich organów regulacyjnych.

Firma BD dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność produktów dostarczanych klientom. Niniejszy komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania produktu został wydany z należyтым uwzględnieniem tego zobowiązania.

Dziękujemy za uwagę i współpracę.

Z poważaniem

Formularz odpowiedzi klienta — PI-21-4000

System stentu żylnego Venovo™

Prosimy przeczytać niniejszy formularz oraz komunikat dotyczący bezpieczeństwa stosowania produktu, PI-21-4000, a następnie odesłać wypełniony i podpisany formularz możliwie jak najszybciej, ale **nie później niż w dniu 30 czerwca 2021 r. na adres bok@bd.com.**

Składając podpis poniżej, potwierdzam przeczytanie niniejszego komunikatu, jego zrozumienie oraz wykonanie wszystkich zalecanych działań zgodnie z wymaganiami.

Prosimy zaznaczyć odpowiednie pole poniżej:

Nie posiadamy żadnych produktów, których dotyczy problem.

LUB

Posiadamy egzemplarze produktu, którego dotyczy problem, i potwierdzamy, że następująca liczba egzemplarzy wymienionych poniżej została zniszczona (**w razie potrzeby należy załączyć dodatkowe listy**)

Numer katalogowy (REF)	Numer partii (Lot)	Liczba zniszczonych produktów (liczba sztuk)	Numer katalogowy (REF)	Numer partii (Lot)	Liczba zniszczonych produktów (liczba sztuk)

Nazwa organizacji			
Adres placówki			
Kod pocztowy			
Numer telefonu		Adres e-mail	
Nazwa dostawcy tego produktu (jeśli nie pochodzi bezpośrednio od firmy BD)			

Proszę wymienić wszystkie placówki/szpitala, których dotyczy odpowiedź (np. inne szpitale należące do organizacji)	Nazwa placówki/szpitala	Kod pocztowy

Imię i nazwisko		Stanowisko	
Podpis		Data	

Załącznik 1: System stentu Venovo™ objęty komunikatem — numer katalogowy EMEA (REF) i numery partii (Lot)

Numer katalogowy (REF)	Nazwa produktu, rozmiar koszulki, średnica stentu × długość, długość cewnika	Unikalny identyfikator urządzenia (UDI-DI)	Numery partii (Lot)
VENEM10040	Venovo 8F 10/40/800mm OUS	00801741101939	ANDU2240, ANDY3304, ANDZ2288, ANDZ3827, ANEP2429, ANEP5328, ANES1042, ANES2208, ANEY3214, ANEY4323, ANFP2666
VENEM10060	Venovo 8F 10/60/800mm OUS	00801741101946	ANDU1102, ANDV1222, ANDV2517, ANDX5352, ANDY2458, ANDY3301, ANDZ1338, ANDZ3819, ANEN1079, ANEN3405, ANEQ4065, ANEQ4961, ANER5167, ANEX0679, ANEX4720, ANEY4324, ANEZ0921, ANEZ2095, ANEZ3410, ANFN3972, ANFP2325
VENEM10080	Venovo 8F 10/80/800mm OUS	00801741101953	ANDU1105, ANDV0287, ANDW4412, ANDX0715, ANDX5308, ANDZ1330, ANDZ2292, ANDZ3826, ANEN1080, ANEQ2730, ANEQ4066, ANES2209, ANET2531, ANEX1699, ANEY3212, ANEY4325, ANEZ0982, ANFP0878, ANFP2364
VENEM10100	Venovo 8F 10/100/800mm OUS	00801741101960	ANDY3305, ANEP0856, ANEP5323, ANEQ2731, ANEQ4067, ANER0516, ANES2210, ANEZ0922, ANFN1442, ANFN3973
VENEM10120	Venovo 8F 10/120/800mm OUS	00801741101977	ANDT1058, ANDU4075, ANDZ1348, ANEN1081, ANEP0857, ANEP3924, ANEQ4068, ANET3794, ANEX0680, ANEZ2096, ANFP2329
VENEM10140	Venovo 8F 10/140/800mm OUS	00801741101984	ANDZ2290, ANEP5324
VENEM10160	Venovo 8F 10/160/800mm OUS	00801741101991	ANDZ2296, ANEP5332, ANFP2330
VENEM12040	Venovo 8F 12/40/800mm OUS	00801741102073	ANDS4772, ANDT0508, ANDW4345, ANDX5315, ANDX5384, ANDY4968, ANDZ2301, ANDZ3817, ANEN4877, ANEP0861, ANEQ2732, ANER5152, ANET0555, ANET3795, ANEW3410, ANEY1223, ANEZ2097, ANEZ3411, ANFN1443, ANFN3974, ANFP0911, ANFP2377
VENEM12060	Venovo 8F 12/60/800mm OUS	00801741102080	ANDS2451, ANDS3973, ANDS4774, ANDT2946, ANDU1877, ANDV0687, ANDW1997, ANDW3561, ANDW4361, ANDX0760, ANDX2782, ANDX3060, ANDX5373, ANDY1234, ANDZ2291, ANDZ3820, ANEN1082, ANEN2140, ANEN4896, ANEP2420, ANEQ1353, ANEQ2733, ANEQ4962, ANER0517, ANER1507, ANES1043, ANES2211, ANES4086, ANEZ0923, ANEZ2098, ANEZ3412, ANFN1444, ANFN2844, ANFN3975, ANFP0879, ANFP2317, ANFP2318

Numer katalogowy (REF)	Nazwa produktu, rozmiar koszulki, średnica stentu × długość, długość cewnika	Unikalny identyfikator urządzenia (UDI-DI)	Numery partii (Lot)
VENEM12080	Venovo 8F 12/80/800mm OUS	00801741102097	ANDS0753, ANDT4130, ANDU3110, ANDV0300, ANDV0702, ANDV1233, ANDV2519, ANDW4378, ANDX0727, ANDX2032, ANDX2426, ANDX3063, ANDX5307, ANDY1221, ANDY2464, ANDY3291, ANDZ1331, ANDZ2297, ANDZ3824, ANEN1064, ANEN2145, ANEN3389, ANEN4886, ANEP0860, ANEP3934, ANEQ1354, ANEQ4069, ANER5168, ANES2212, ANEZ0924, ANEZ2099, ANEZ3952, ANFN2787, ANFN3976, ANFP0912, ANFP2336
VENEM12100	Venovo 8F 12/100/800mm OUS	00801741102103	ANDS2461, ANDS3976, ANDS4839, ANDT4131, ANDU1889, ANDW1999, ANDW4395, ANDX0739, ANDX2031, ANDX3062, ANDX5323, ANDX5363, ANDY1231, ANDY3284, ANDY4974, ANDZ3823, ANEN2147, ANEN3398, ANEQ1355, ANEQ2734, ANEQ4963, ANER0475, ANER0518, ANER1508, ANES4087, ANET0556, ANEY2031, ANEZ2100, ANEZ3429, ANFN1445, ANFN3977, ANFP2365
VENEM12120	Venovo 8F 12/120/800mm OUS	00801741102110	ANDU4028, ANDV0275, ANDW4413, ANDX0751, ANDX5301, ANDY4972, ANEN1083, ANEN4883, ANEP5329, ANEQ2735, ANER5120, ANES4088, ANFP0880, ANFP2331
VENEM12140	Venovo 8F 12/140/800mm OUS	00801741102127	ANDU1103, ANDU4040, ANDX5327, ANDX5389, ANDZ1326, ANEP5309, ANEQ1356, ANEQ2736, ANER0519, ANER1535
VENEM12160	Venovo 8F 12/160/800mm OUS	00801741102134	ANDU1104, ANDY2452, ANDY3299, ANDZ3825, ANEN1084, ANEN4894, ANEQ4964, ANER0520
VENEM14040	Venovo 9F 14/40/800mm OUS	00801741102226	ANDS1298, ANDS4185, ANDV4538, ANDW2003, ANDW3567, ANDX0765, ANDX2427, ANDX3065, ANDX5353, ANDY1226, ANDZ2279, ANDZ3828, ANEN1065, ANEN2142, ANEN3391, ANEQ1357, ANEQ2737, ANEQ4070, ANEQ4965, ANES1029, ANES4089, ANEX1705, ANEY2032, ANEY3213, ANEZ0985, ANEZ3425, ANFN1494, ANFN2845, ANFP0913, ANFP2378, ANFQ2056
VENEM14060	Venovo 9F 14/60/800mm OUS	00801741102233	ANDS1311, ANDS4773, ANDS4840, ANDV0709, ANDW3559, ANDX0711, ANDX2029, ANDX3059, ANDX5372, ANDY1218, ANDY4958, ANDZ1324, ANDZ2275, ANDZ3838, ANEN3392, ANEN4876, ANEP0871, ANEP2432, ANEP3925, ANEQ0218, ANEQ1358, ANEQ2738, ANEQ4753, ANEQ4966, ANER0528, ANES1044, ANES2213, ANEZ0925, ANEZ2101, ANEZ3413, ANEZ3932, ANFN1446, ANFN2788, ANFN3978, ANFP0881, ANFP2354, ANFQ2082, ANFQ2925

Numer katalogowy (REF)	Nazwa produktu, rozmiar koszulki, średnica stentu × długość, długość cewnika	Unikalny identyfikator urządzenia (UDI-DI)	Numery partii (Lot)
VENEM14080	Venovo 9F 14/80/800mm OUS	00801741102240	ANDS2470, ANDS3974, ANDS4775, ANDT1680, ANDU3123, ANDV3568, ANDV4535, ANDW1478, ANDW3563, ANDX1479, ANDX3061, ANDY1237, ANDY2449, ANDY3282, ANDZ1325, ANDZ2282, ANDZ3821, ANEN1062, ANEN3390, ANEN4871, ANEP2434, ANEQ0215, ANEQ1359, ANEQ4967, ANER0521, ANER1509, ANES1045, ANES2214, ANES4090, ANEW3418, ANEZ0926, ANEZ2102, ANEZ3414, ANEZ3933, ANFN2789, ANFN3979, ANFN3980, ANFP2366, ANFQ1012
VENEM14100	Venovo 9F 14/100/800mm OUS	00801741102257	ANDS0754, ANDS3977, ANDS4778, ANDT1681, ANDV0706, ANDV4537, ANDW2000, ANDW3565, ANDW4347, ANDX0723, ANDX2033, ANDX3064, ANDX5300, ANDX5382, ANDY1212, ANDY4957, ANDZ1329, ANDZ2284, ANDZ3837, ANEN2136, ANEN3400, ANEN4879, ANEP0870, ANEP2426, ANEQ1360, ANEQ2739, ANEQ4968, ANER0529, ANER1536, ANES1030, ANET0557, ANEY2033, ANEZ0927, ANEZ2103, ANEZ3415, ANEZ3934, ANFN1447, ANFN2790, ANFN3981, ANFP0882, ANFP2355
VENEM14120	Venovo 9F 14/120/800mm OUS	00801741102264	ANDS2482, ANDT4128, ANDU1113, ANDW4362, ANDX0716, ANDX3058, ANDX5314, ANDY1213, ANDY2460, ANDZ1323, ANDZ2281, ANDZ3816, ANEN2149, ANEN4884, ANEP2415, ANEQ1361, ANEQ2740, ANEQ4071, ANER1534, ANES2215, ANEZ0928, ANEZ3416, ANFN2791, ANFN3982, ANFP2379
VENEM14140	Venovo 9F 14/140/800mm OUS	00801741102271	ANDS2452, ANDS3975, ANDS4777, ANDT4129, ANDW4379, ANDX5322, ANDX5383, ANDZ1354, ANDZ3822, ANEN2155, ANEP0872, ANEQ2741, ANEQ4072, ANER0522, ANES2216, ANET0558, ANEZ3428, ANFP2332, ANFQ2057
VENEM14160	Venovo 9F 14/160/800mm OUS	00801741102288	ANDU1107, ANDU1900, ANDU3137, ANDW4396, ANDY2461, ANDY3277, ANDY4969, ANDZ1321, ANEP0853, ANEP5311, ANEQ1362, ANEQ2742, ANER0523, ANER2794, ANES4091, ANET3796, ANEZ2104, ANEZ3423, ANFP2333
VENEM16040	Venovo 10F 16/40/800mm OUS	00801741102363	ANDS3980, ANDV0265, ANDV2520, ANDW4415, ANDX5306, ANDY2465, ANDY3303, ANDZ1339, ANDZ3832, ANEN3393, ANEP2433, ANEQ1363, ANEQ2743, ANEQ4969, ANES1031, ANEW3409, ANEX0752, ANEX6159, ANEZ0929, ANEZ3417, ANFN2849, ANFP0883, ANFP2367, ANFQ2058
VENEM16060	Venovo 10F 16/60/800mm OUS	00801741102370	ANDS1325, ANDS3979, ANDS4783, ANDT1684, ANDT2944, ANDV0252, ANDV0708, ANDV1247,

Numer katalogowy (REF)	Nazwa produktu, rozmiar koszulki, średnica stentu × długość, długość cewnika	Unikalny identyfikator urządzenia (UDI-DI)	Numery partii (Lot)
			ANDV1984, ANDV2513, ANDW4348, ANDX0755, ANDX2037, ANDX2423, ANDX3070, ANDX5326, ANDX5388, ANDY1215, ANDZ1355, ANDZ3831, ANEN1066, ANEN2135, ANEN4887, ANEP2422, ANEP3928, ANEQ1364, ANEQ2744, ANER1539, ANES1046, ANES2217, ANES4092, ANEW3411, ANEX0751, ANEZ0930, ANEZ2105, ANEZ3418, ANFN1448, ANFN2792, ANFN3983, ANFP0884, ANFP2356, ANFP3400, ANFP4500
VENEM16080	Venovo 10F 16/80/800mm OUS	00801741102387	ANDS0760, ANDS1272, ANDS3981, ANDS4784, ANDT1685, ANDV0694, ANDV3571, ANDV4540, ANDW1485, ANDW2016, ANDW3579, ANDW4364, ANDX0707, ANDX2041, ANDX2424, ANDX3074, ANDX5318, ANDY1224, ANDZ1341, ANDZ2289, ANDZ3833, ANEN1067, ANEN2137, ANEN4874, ANEP0869, ANEP2431, ANEP3940, ANEQ1365, ANEQ2745, ANER1542, ANES1032, ANES4093, ANEV3070, ANEW2004, ANEW3377, ANEX6015, ANEZ0931, ANEZ3419, ANEZ3937, ANFN1495, ANFN2793, ANFN3984, ANFP0885, ANFP2339, ANFP3403
VENEM16100	Venovo 10F 16/100/800mm OUS	00801741102394	ANDU1855, ANDU3138, ANDV4530, ANDW4381, ANDX0735, ANDX3067, ANDX5325, ANDX5386, ANDY3294, ANDZ1334, ANDZ3830, ANEN1061, ANEN3388, ANEN4882, ANEP2416, ANEP3926, ANEQ1366, ANEQ2746, ANES1047, ANEZ3433, ANEZ3938, ANFN2847, ANFP0886, ANFP2380, ANFP4501
VENEM16120	Venovo 10F 16/120/800mm OUS	00801741102400	ANDV0713, ANDW1481, ANDW2008, ANDX0747, ANDX5365, ANDY2453, ANDY3279, ANEN3383, ANEN4885, ANEQ1367, ANEQ2747, ANEQ4073, ANEQ4970, ANER1525, ANES2218, ANES4094, ANET0559, ANEX3089, ANEY4326, ANEZ0983, ANEZ3420, ANFN1449, ANFN3985, ANFP0887, ANFP2334, ANFP3397
VENEM16140	Venovo 10F 16/140/800mm OUS	00801741102417	ANDS2462, ANDS4841, ANDX2786, ANDX5371, ANDZ3836, ANEN4891, ANEP3913, ANEP5312, ANEQ1374, ANER1547, ANFQ1013
VENEM16160	Venovo 10F 16/160/800mm OUS	00801741102424	ANDU4050, ANDV0695, ANDV1258, ANDX0728, ANDX5366, ANDY2454, ANDY3300, ANEN1068, ANEN4878, ANEP0858, ANEP2410, ANEP3915, ANEP5313, ANEQ4971, ANER0524, ANER1510, ANES2219, ANES4095, ANFN1450, ANFQ1014
VENEM18040	Venovo 10F 18/40/800mm OUS	00801741102509	ANDT1056, ANDW4398, ANDX5360, ANDZ1349, ANDZ2302, ANEN4890, ANEP3917, ANEP5321,

Numer katalogowy (REF)	Nazwa produktu, rozmiar koszulki, średnica stentu × długość, długość cewnika	Unikalny identyfikator urządzenia (UDI-DI)	Numerы partii (Lot)
			ANEQ4074, ANER1526, ANEW4261, ANEZ3421, ANFP3414
VENEM18060	Venovo 10F 18/60/800mm OUS	00801741102516	ANDS4787, ANDU4073, ANDV0700, ANDV1211, ANDV2136, ANDV2518, ANDX0761, ANDX5350, ANDZ1351, ANDZ2280, ANEN2143, ANEN3394, ANEN4875, ANEP2411, ANEQ1368, ANEQ2748, ANEQ4972, ANER1546, ANES1033, ANEZ0984, ANFN1451, ANFN3986, ANFP0888, ANFP0889, ANFP2335, ANFP3413
VENEM18080	Venovo 10F 18/80/800mm OUS	00801741102523	ANDS2471, ANDS4781, ANDV0696, ANDW1483, ANDW2011, ANDW4416, ANDX0719, ANDX3068, ANDX5328, ANDX5368, ANDY1233, ANDZ1356, ANEN2138, ANEP2425, ANEP3916, ANEQ1369, ANEQ2749, ANEQ4973, ANER0525, ANER1538, ANES1048, ANES2220, ANET0560, ANEZ0932, ANEZ2106, ANEZ3422, ANFN1452, ANFN3987, ANFP0890, ANFP2342
VENEM18100	Venovo 10F 18/100/800mm OUS	00801741102530	ANDU4076, ANDW1479, ANDW2006, ANDX0712, ANDX2785, ANDX5364, ANDY1232, ANDZ2299, ANEN2154, ANEN3381, ANEP2437, ANEP3914, ANEP5316, ANEQ1370, ANEQ2750, ANER0476, ANER0526, ANER1511, ANES1049, ANES4096, ANFP3415, ANFQ1015
VENEM18120	Venovo 10F 18/120/800mm OUS	00801741102547	ANDW2022, ANDW4350, ANDY3278, ANEN1069, ANEN3401, ANEP2419, ANFP2343
VENEM18140	Venovo 10F 18/140/800mm OUS	00801741102554	ANDW2025, ANDX0740, ANDY2466, ANDY3281, ANEN1085, ANEP0873, ANEP5314, ANEQ1371, ANEQ2751, ANEQ4974, ANER0527, ANER1512, ANES4097
VENEM18160	Venovo 10F 18/160/800mm OUS	00801741102561	ANDX0752, ANDX5380, ANDY3307, ANEN4889, ANEQ4075, ANFN1453
VENEM20040	Venovo 10F 20/40/800mm OUS	00801741102998	ANDV0697, ANDY2451, ANDY4970, ANDZ1344, ANEP3921, ANEQ4076, ANEQ4975, ANER0507, ANES4098, ANEZ0933, ANFP0914, ANFP4502
VENEM20060	Venovo 10F 20/60/800mm OUS	00801741103001	ANDV4532, ANDW2026, ANDX0766, ANDX2783, ANDX5370, ANDZ1350, ANDZ2303, ANEN3384, ANEP2440, ANEP3918, ANEP5330, ANEQ1372, ANEQ2752, ANEQ4976, ANER0508, ANER0509, ANES4099, ANFP3412, ANFP4503
VENEM20080	Venovo 10F 20/80/800mm OUS	00801741103018	ANDV4527, ANDW4366, ANDX0724, ANDX5351, ANDY2468, ANDY3292, ANDZ1333, ANDZ2277, ANEP2439, ANEP3933, ANEQ1373, ANEQ2753,

Numer katalogowy (REF)	Nazwa produktu, rozmiar koszulki, średnica stentu × długość, długość cewnika	Unikalny identyfikator urządzenia (UDI-DI)	Numery partii (Lot)
			ANEQ4077, ANEQ4977, ANER0506, ANER1513, ANES4100, ANFP2344
VENEM20100	Venovo 10F 20/100/800mm OUS	00801741103025	ANDW1490, ANDW2027, ANDY2455, ANDY3285, ANEP0874, ANEP5310, ANER1527, ANES4101, ANET2532, ANEU0743
VENEM20120	Venovo 10F 20/120/800mm OUS	00801741103032	ANDW2024, ANDZ2294, ANEP0876, ANEP5331, ANES2221
VENEM20140	Venovo 10F 20/140/800mm OUS	00801741103049	ANDU4029, ANDY2450, ANDY3296, ANEN3399, ANEN4870, ANEP2438, ANFP2345, VENEM20160
VENEM20160	Venovo 10F 20/160/800mm OUS	00801741103056	ANDV0253, ANDW2005, ANEP0875, ANEP5315, ANEQ2754, ANES2222, ANFN3988
VENEL10040	Venovo 8F 10/40/1200mm OUS	00801741102004	ANDU2239, ANDW4406, ANDX5374, ANEP3938, ANEQ2716, ANES2187
VENEL10060	Venovo 8F 10/60/1200mm OUS	00801741104664	ANDT1057, ANDU4074, ANDW4338, ANDX5309, ANDZ2308, ANEP0852, ANEP3936, ANEQ4036, ANEQ4945, ANER5149, ANET3785, ANEX0671, ANEX3092, ANEZ0906, ANEZ3430, ANFN1430, ANFP2368
VENEL10080	Venovo 8F 10/80/1200mm OUS	00801741104671	ANDU4027, ANDV4526, ANDW4339, ANDX5324, ANDX5385, ANDZ3818, ANEN1086, ANEQ2717, ANEQ4037, ANEQ4946, ANER5165, ANET2530, ANEU0741, ANEU3303, ANEX0749, ANEZ0907, ANFN3944, ANFP2369
VENEL10100	Venovo 8F 10/100/1200mm OUS	00801741102035	ANDT0505, ANDT1054, ANDY2469, ANDY4963, ANDZ1345, ANEP0862, ANEP2417, ANEW2047, ANEW4217, ANEY3209, ANEY4322, ANFN1431, ANFN3945, ANFP2370
VENEL10120	Venovo 8F 10/120/1200mm OUS	00801741102042	ANEQ1347, ANES2188, ANFP2349
VENEL10140	Venovo 8F 10/140/1200mm OUS	00801741102059	ANDU1108, ANDY3280, ANEN3385, ANEQ1348, ANEQ4038
VENEL10160	Venovo 8F10/160/1200mm OUS	00801741102066	ANDS1027, ANDW1996, ANDX6354, ANDY2448, ANET1855
VENEL12040	Venovo 8F 12/40/1200mm OUS	00801741102141	ANDT0506, ANDT1055, ANDU2242, ANDU4039, ANDW1998, ANDX1402, ANDY3289, ANDY4964, ANDZ2307, ANEN2153, ANEP2424, ANES2189, ANET0542, ANEW3366, ANEW4218, ANEX1697, ANEX6010, ANEZ0908, ANEZ2081, ANEZ3398, ANFN3946, ANFP0857, ANFP2319

Numer katalogowy (REF)	Nazwa produktu, rozmiar koszulki, średnica stentu × długość, długość cewnika	Unikalny identyfikator urządzenia (UDI-DI)	Numery partii (Lot)
VENEL12060	Venovo 8F 12/60/1200mm OUS	00801741102158	ANDS0752, ANDT0507, ANDT1059, ANDV4534, ANDX1401, ANDX2425, ANDX3057, ANDX5362, ANDY1230, ANDZ1322, ANDZ2286, ANEN4897, ANEP0867, ANEP2421, ANEP3930, ANEQ2718, ANEQ4039, ANER1514, ANES2190, ANES4062, ANEV1711, ANEW3367, ANEW4219, ANEX0746, ANEX1708, ANEX3091, ANEX6018, ANEY1228, ANEZ2082, ANFN1432, ANFN3947, ANFP0858, ANFP2358, ANFP4499
VENEL12080	Venovo 8F 12/80/1200mm OUS	00801741102172	ANDV3567, ANDV4528, ANDX1374, ANDX1405, ANDX2034, ANDY1238, ANDY4960, ANDZ1332, ANDZ2304, ANEN1070, ANEN3402, ANEP3939, ANEP5317, ANEQ2719, ANEQ4040, ANER5118, ANES2191, ANET0543, ANET3786, ANEW4260, ANEX3093, ANEX6157, ANEY1221, ANEY2034, ANEY3210, ANEZ3431, ANFN2783, ANFN3948, ANFP0859, ANFP2359
VENEL12100	Venovo 8F 12/100/1200mm OUS	00801741102189	ANDU2243, ANDV1244, ANDW4355, ANDX1406, ANDX2035, ANDX5316, ANDX5390, ANDY3308, ANDZ2283, ANEN1071, ANEN4895, ANEP2435, ANEQ2720, ANEQ4041, ANEQ4947, ANER1515, ANES4063, ANET3787, ANEW3412, ANEX0672, ANEX3081, ANEX6011, ANEY3211, ANEZ3399, ANFN1433, ANFN3949, ANFP0908, ANFP2360, ANFP3394
VENEL12120	Venovo 8F 12/120/1200mm OUS	00801741102196	ANDS0751, ANDS4788, ANDS4823, ANDU2244, ANDV4533, ANDW4372, ANDX1373, ANDX3056, ANDX5361, ANDY1229, ANDY2456, ANDY3283, ANDY4965, ANDZ1327, ANDZ2287, ANEN2150, ANEN4880, ANEP0877, ANEQ4042, ANER1516, ANEW4220, ANEX1707, ANFN1434, ANFN2784, ANFN3950, ANFN3951, ANFP2361
VENEL12140	Venovo 8F 12/140/1200mm OUS	00801741102202	ANDS1282, ANDU2245, ANDW2002, ANDW4389, ANDX5376, ANDY3288, ANEN1072, ANEN3387, ANEP2430, ANEQ4043, ANER1517, ANES4064, ANFN3952, ANFN3953, ANFP0860
VENEL12160	Venovo 8F 12/160/1200mm OUS	00801741102219	ANDS4776, ANDT1686, ANDV4536, ANDX1403, ANDX5375, ANDY3287, ANEP2412, ANEQ4948, ANES4065, ANEZ3427, ANFN3954, ANFP0861
VENEL14040	Venovo 9F 14/40/1200mm OUS	00801741102295	ANDS0902, ANDS1029, ANDS4184, ANDT2943, ANDU1106, ANDV0250, ANDV1245, ANDV2515, ANDW2001, ANDW4407, ANDX1404, ANDX6356, ANDY4962, ANEP3937, ANEQ4044, ANEQ4949, ANER0505, ANES1035, ANES4066, ANET1856, ANET1857, ANEW3368, ANEW4221, ANEX6012, ANEZ0909, ANEZ2083, ANEZ3424,

Numer katalogowy (REF)	Nazwa produktu, rozmiar koszulki, średnica stentu × długość, długość cewnika	Unikalny identyfikator urządzenia (UDI-DI)	Numery partii (Lot)
			ANFN1435, ANFN2785, ANFP0862, ANFP2362, ANFP3393
VENEL14060	Venovo 9F 14/60/1200mm OUS	00801741102301	ANDS0757, ANDS1269, ANDS2479, ANDS4824, ANDT2945, ANDU2246, ANDV0251, ANDV0690, ANDV1256, ANDX0759, ANDX2039, ANDX3072, ANDX5305, ANDY1220, ANEN1073, ANEN2152, ANEP0854, ANEP3569, ANEP3931, ANES2192, ANES4067, ANET0544, ANEU4252, ANEW2002, ANEW3369, ANEW4222, ANEX0673, ANEX1702, ANEX3082, ANEX4716, ANEX6023, ANEY1224, ANEZ0910, ANEZ2084, ANEZ3400, ANFN3955, ANFP0863, ANFP2320, ANFP3402
VENEL14080	Venovo 9F 14/80/1200mm OUS	00801741102318	ANDS0756, ANDS1283, ANDS4825, ANDW4341, ANDX1380, ANDX1412, ANDX2038, ANDX3071, ANDX5311, ANDY1222, ANDY2462, ANDY4973, ANDZ1352, ANDZ3839, ANEN2144, ANEN3396, ANEP3935, ANEP5326, ANEQ4045, ANEQ4950, ANER1540, ANES2193, ANES4068, ANET0545, ANET3788, ANEW2046, ANEW3416, ANEX0674, ANEX1700, ANEX3083, ANEX6022, ANEY1225, ANEY4328, ANEZ0911, ANEZ2085, ANEZ3401, ANEZ3957, ANFN2848, ANFN3956, ANFP0864, ANFP1519, ANFP2315, ANFP2316
VENEL14100	Venovo 9F 14/100/1200mm OUS	00801741102325	ANDS1296, ANDS4826, ANDT1683, ANDV0711, ANDV1209, ANDV3569, ANDW1480, ANDX1408, ANDX2036, ANDX5302, ANDY3309, ANDZ1342, ANDZ2276, ANDZ3829, ANEN1074, ANEN4899, ANEP0866, ANEP3927, ANEP5325, ANEQ4046, ANEQ4951, ANER1537, ANES2194, ANES4069, ANET0546, ANET3789, ANEV1712, ANEW2003, ANEW3370, ANEW4223, ANEX0747, ANEX1709, ANEX3094, ANEX6019, ANEZ0912, ANEZ2086, ANEZ3402, ANEZ3956, ANFN2846, ANFN3957, ANFP0865, ANFP2340, ANFP3395
VENEL14120	Venovo 9F 14/120/1200mm OUS	00801741102332	ANDS1310, ANDS4827, ANDV0698, ANDV3572, ANDV4541, ANDW1486, ANDX1382, ANDX1416, ANDX3075, ANDX5319, ANDY1225, ANDY3298, ANDZ2278, ANDZ3834, ANEN1075, ANEP0878, ANEP2428, ANEP3932, ANEQ2721, ANEQ4047, ANEQ4952, ANER1543, ANES2195, ANES4070, ANET0547, ANEW3421, ANEX0754, ANEZ0913, ANEZ2087, ANEZ3403, ANFN2850, ANFN3958, ANFN3959, ANFP0866, ANFP2337, ANFP3405
VENEL14140	Venovo 9F 14/140/1200mm OUS	00801741102349	ANDU2247, ANDU3135, ANDV0710, ANDV2510, ANDV3575, ANDW4356, ANDX1372, ANDX1386, ANDX3079, ANDY1219, ANDY2463, ANDY4971, ANDZ3835, ANEN3397, ANEP3919, ANEQ2722,

Numer katalogowy (REF)	Nazwa produktu, rozmiar koszulki, średnica stentu × długość, długość cewnika	Unikalny identyfikator urządzenia (UDI-DI)	Numery partii (Lot)
			ANEQ4048, ANEQ4953, ANES2196, ANET0548, ANEX1704, ANEY1222, ANEY2035, ANEZ2088, ANEZ3438, ANFN3960, ANFN3961, ANFP0867, ANFP2363, ANFP3410
VENEL14160	Venovo 9F 14/160/1200mm OUS	00801741102356	ANDS0761, ANDS3982, ANDS4785, ANDS4828, ANDU2248, ANDU3096, ANDV0298, ANDV1221, ANDV2511, ANDW1487, ANDX1418, ANDX2042, ANDX3077, ANDX5320, ANDY1216, ANEN2139, ANEP0868, ANEQ0214, ANEQ1349, ANER1545, ANES4071, ANEZ0914, ANEZ2089, ANEZ3437, ANFN3962, ANFP0868, ANFP2341, ANFP3407
VENEL16040	Venovo 10F 16/40/1200mm OUS	00801741102431	ANDS4829, ANDU1854, ANDU3109, ANDX5303, ANDY3290, ANDY4966, ANEN1076, ANEN3916, ANEP3923, ANEQ2723, ANEQ4049, ANEQ4954, ANER5134, ANES4072, ANEW4224, ANEX3084, ANEX6013, ANEY2036, ANEZ3432, ANFP0909, ANFP2371
VENEL16060	Venovo 10F 16/60/1200mm OUS	00801741102448	ANDS4830, ANDT1060, ANDT1682, ANDU3122, ANDU4071, ANDV0703, ANDW4373, ANDX1375, ANDX1407, ANDX2422, ANDX3066, ANDX5321, ANDY1227, ANDZ1336, ANDZ2305, ANEN1077, ANEN2141, ANEN4898, ANEP0855, ANEP2413, ANEQ4050, ANEQ4955, ANER0473, ANER1518, ANES2197, ANES4073, ANET0549, ANEW4225, ANEX0675, ANEX1701, ANEX3085, ANEY2028, ANEZ0915, ANEZ2090, ANEZ3404, ANFN1436, ANFN2786, ANFP0869, ANFP2326
VENEL16080	Venovo 10F 16/80/1200mm OUS	00801741102455	ANDU1111, ANDU3136, ANDV0286, ANDV0707, ANDV2514, ANDW4390, ANDX1417, ANDX2784, ANDX3076, ANDX5379, ANDY1235, ANDY2457, ANDY4959, ANDZ1346, ANDZ2285, ANDZ3840, ANEN3403, ANEN4900, ANEP0864, ANEP3566, ANEP3941, ANEQ4051, ANEQ4956, ANER1544, ANES2198, ANES4074, ANET0550, ANET3790, ANEW3371, ANEW4226, ANEX0676, ANEX3086, ANEX4717, ANEX6014, ANEY1226, ANEY4327, ANEZ3405, ANFN1437, ANFN3963, ANFP0870, ANFP2338
VENEL16100	Venovo 10F 16/100/1200mm OUS	00801741102462	ANDS1323, ANDS2480, ANDS4831, ANDT1229, ANDV0691, ANDX0750, ANDX1387, ANDX1422, ANDX2043, ANDX3080, ANDX5329, ANDX5359, ANDY1217, ANDY4975, ANDZ1353, ANEN4892, ANEP2427, ANEQ2724, ANEQ4052, ANEQ4957, ANER1519, ANES2199, ANES4075, ANET0551, ANEX1706, ANEX3087, ANEX6024, ANEY1227, ANEY4329, ANEZ3406, ANFN1438, ANFN2851, ANFN3964, ANFP0871, ANFP2327

Numer katalogowy (REF)	Nazwa produktu, rozmiar koszulki, średnica stentu × długość, długość cewnika	Unikalny identyfikator urządzenia (UDI-DI)	Numerы partii (Lot)
VENEL16120	Venovo 10F 16/120/1200mm OUS	00801741102479	ANDS0759, ANDS4832, ANDT2447, ANDV0263, ANDV0712, ANDV1232, ANDV2516, ANDW4409, ANDX1381, ANDX1415, ANDX2040, ANDX3073, ANDX5312, ANDY1223, ANDY4961, ANEN1063, ANEN4881, ANEP0865, ANEP2414, ANEQ1350, ANEQ2725, ANEQ4053, ANEQ4958, ANER1541, ANES2200, ANES4076, ANET0552, ANEW3420, ANEX0753, ANEX1711, ANEZ2091, ANEZ3407, ANFN3965, ANFP0872, ANFP2348
VENEL16140	Venovo 10F 16/140/1200mm OUS	00801741102486	ANDS1270, ANDS4833, ANDT2448, ANDU3083, ANDV1246, ANDX1379, ANDX2030, ANDX3069, ANDX5354, ANDY1214, ANEN3404, ANEP2436, ANEQ4054, ANES2201, ANEW3415, ANFN3966, ANFP0873, ANFP2350
VENEL16160	Venovo 10F 16/160/1200mm OUS	00801741102493	ANDS1284, ANDS2450, ANDS4786, ANDS4834, ANDT4133, ANDV0688, ANDV3574, ANDV4544, ANDW1488, ANDX0764, ANDX1370, ANDX1385, ANDX1421, ANDX5358, ANDY1228, ANEQ4055, ANES2202, ANEX0677, ANEZ0916, ANEZ2092, ANEZ3408, ANFN3967, ANFP2372, ANFP3409
VENEL18040	Venovo 10F 18/40/1200mm OUS	00801741102578	ANDS1297, ANDS4835, ANDX1414, ANDX5356, ANDZ1340, ANEN1078, ANEN4872, ANEP5320, ANEQ2726, ANEQ4056, ANES2203, ANEU0742, ANEW3372, ANEX4718, ANEZ0917, ANFN3968, ANFP2351
VENEL18060	Venovo 10F 18/60/1200mm OUS	00801741102585	ANDS0755, ANDS4780, ANDT1230, ANDU3097, ANDV0264, ANDV0704, ANDV2512, ANDV4539, ANDW4342, ANDX1377, ANDX1409, ANDX5367, ANDY3297, ANDZ1337, ANEN2148, ANEN4893, ANEQ1351, ANEQ4057, ANEQ4959, ANES1036, ANES2204, ANET3791, ANEU3304, ANEW3419, ANEX3088, ANEX6158, ANEY2029, ANEZ3434, ANFP0874, ANFP2373
VENEL18080	Venovo 10F 18/80/1200mm OUS	00801741102592	ANDS1308, ANDS4836, ANDV0299, ANDV0701, ANDV3573, ANDV4542, ANDW4358, ANDX1384, ANDX1420, ANDX3078, ANDX5381, ANDY1236, ANDZ1347, ANDZ2293, ANEN2146, ANEN4873, ANEP2423, ANEQ4058, ANER1520, ANER5166, ANES2205, ANES4077, ANET0553, ANEV1713, ANEW3373, ANEW4227, ANEX0748, ANEX3097, ANEX6016, ANFP0875, ANFP2328
VENEL18100	Venovo 10F 18/100/1200mm OUS	00801741102608	ANDU1109, ANDV0692, ANDV3570, ANDW4375, ANDX1378, ANDX5304, ANDX5387, ANEN2151, ANEN3380, ANEN4888, ANEP3920, ANEQ4059, ANER4198, ANES1037, ANES4078, ANET3792,

Numer katalogowy (REF)	Nazwa produktu, rozmiar koszulki, średnica stentu × długość, długość cewnika	Unikalny identyfikator urządzenia (UDI-DI)	Numerы partii (Lot)
			ANEW2045, ANEW3414, ANEX6021, ANFN1439, ANFP0876, ANFP2374
VENEL18120	Venovo 10F 18/120/1200mm OUS	00801741102967	ANDS2460, ANDS4837, ANDV1257, ANDW4392, ANDX5317, ANDY2467, ANDY3286, ANDZ1328, ANEP5318, ANEQ2727, ANEQ4060, ANES1038, ANES4079, ANET0554, ANEW3413, ANEX6020, ANEZ3435, ANFN3969, ANFP0910, ANFQ1011
VENEL18140	Venovo 10F 18/140/1200mm OUS	00801741102974	ANDS4779, ANDS4838, ANDV0686, ANDW1482, ANDW4410, ANDX1376, ANEP5319, ANEQ2728, ANES2206, ANES4080, ANFN3970, ANFP2352
VENEL18160	Venovo 10F 18/160/1200mm OUS	00801741102981	ANDS3978, ANDS4782, ANDV0705, ANDW1484, ANDW4344, ANDX1410, ANDX5377, ANER5150, ANES4081, ANEX0750, ANEX1710, ANEX3095, ANFN1440, ANFN3971, ANFP2375
VENEL20040	Venovo 10F 20/40/1200mm OUS	00801741103063	ANDS1028, ANDU3353, ANDX5313, ANDX6355, ANDZ1343, ANDZ2300, ANET1858, ANET1859, ANEW3374, ANEX6017, ANEZ3439, ANFP2353
VENEL20060	Venovo 10F 20/60/1200mm OUS	00801741103070	ANDS1324, ANDT2896, ANDU1112, ANDV0699, ANDX1383, ANDX1419, ANDX5369, ANDY4967, ANDZ2295, ANEN3395, ANEP5327, ANEQ1352, ANEQ4061, ANER1521, ANER5119, ANES4082, ANEW3417, ANEX0755, ANEX3096, ANEZ3409, ANFP2321
VENEL20080	Venovo 10F 20/80/1200mm OUS	00801741103087	ANDS0758, ANDT4132, ANDU4060, ANDV0693, ANDV1210, ANDX1413, ANDX5355, ANDY3293, ANDZ2298, ANEN3406, ANEP0859, ANEP3922, ANEQ4062, ANER1522, ANER2793, ANER5135, ANES1039, ANES4083, ANET3793, ANEU3274, ANEX1703, ANEX4719, ANEY2030, ANEZ0918, ANEZ2093, ANEZ3426, ANFP2322
VENEL20100	Venovo 10F 20/100/1200mm OUS	00801741103094	ANDS1271, ANDV4531, ANDW4359, ANDX1411, ANDX5310, ANDY2459, ANDY3302, ANDZ2306, ANEN3382, ANEP3929, ANEP5333, ANEQ2729, ANER1523, ANER5151, ANES4084, ANEW3375, ANEZ0919, ANFN1441, ANFP2323, ANFP3398
VENEL20120	Venovo 10F 20/120/1200mm OUS	00801741103100	ANDS1285, ANDT1231, ANDV0689, ANDW4376, ANDX5357, ANDY3306, ANDZ2309, ANEP0851, ANEP5322, ANEQ4063, ANER0474, ANER1524, ANES1040, ANEZ2094, ANEZ3436, ANFP2324
VENEL20140	Venovo 10F 20/140/1200mm OUS	00801741103117	ANDS2469, ANDW4393, ANDX5378, ANES2207
VENEL20160	Venovo 10F 20/160/1200mm OUS	00801741103124	ANDS2481, ANDT1222, ANDU1110, ANDU1866, ANDX1369, ANDY3295, ANDZ1335, ANEN3386,

Numer katalogowy (REF)	Nazwa produktu, rozmiar koszulki, średnica stentu × długość, długość cewnika	Unikalny identyfikator urządzenia (UDI-DI)	Numery partii (Lot)
			ANEP0863, ANEP2418, ANEQ4064, ANEQ4960, ANES1041, ANES4085, ANEW3376, ANEW4228, ANEX0678, ANEX1698, ANEZ0920, ANFP0877, ANFP2376, ANFP3406

Załącznik 2: Ilustracja pogładowa etykiety produktu

VENOVO™ Venous Stent System

Système de stent veineux • Venöses Stentsystem • Sistema di stent venoso • Sistema de stent venoso • Veneuze stentsysteem • Sistema de Stent Venoso • Σύστημα Φλεβικού Stent • Venøst stentsystem • Venøst stentsystem • Laskimostenttijärjestelmä • Venøst stentsystem • System stentow żylnych • Vénás sztent rendszer • Systém žilního stentu • Venöz Stent Sistemi • 靜脈血管支架系統 • 정맥 스텐트 시스템 • Система венозного стента • Venözny stentový systém • Venoosne stendisüsteem • Veninio stento sistema • Sistem cu stent venos • Венозна стент система • نظام الدعامات الوريدية

40 mm
10 mm

111.5 cm
80 cm

REF **VENEM10040**
LOT **ANUGXXXX**

2999-01-01

.035"
(0.89 mm)

8F
(2.67 mm)

VENOVO™ Venous Stent System
 REF VENEM10040 LOT ANUGXXXX
 2999-01-01
 (01)0080174110193 9 (17)990101 (10)ANUGXXXX

STERILE EO

CE 2797

Manufacturer:
 Angiomed GmbH & Co. Medizintechnik KG
 Wachhausstrasse 6
 76227 Karlsruhe
 Germany
 Tel: ++49 721 9445-0
 Fax: ++49 721 9445-111
 Bard and Venovo are trademarks and/or registered trademarks of C. R. Bard Inc.
 Copyright © 2015 C.R.Bard, Inc. All Rights Reserved.

B05915 Rev. 0/02-15

GTIN / Use by / Lot Number

(01)0080174110193 9 (17)990101 (10)ANUGXXXX

Numer partii (Lot)

Numer katalogowy (REF)

Data ważności

Unikalny identyfikator urządzenia (UDI-DI)